

歯科用隣在歯隔離用テープ TDV アイソテープ



撥水性に優れた歯科用テフロンテープです。



材質：テフロン
サイズ：幅 18mm、厚さ 0.07mm、長さ 3m
カラー：ライトブルー

臨床写真ご提供：YOKOTA DENTAL OFFICE 横田 高一先生

- エッチング材、接着材、コンポジットレジンなどの適用時に、患歯と隣在歯とを隔離し、侵襲を避けたい部位を保護します。
- 耐薬品性に優れた材質で、口腔内使用を目的として設計開発しています。
- 歯間部への挿入が容易な厚さで、柔軟性があり、操作中のテープ同士の粘着を防止し、隣在歯にしっかりと適合します。

アイソテープ 使用方法



テープを必要な長さにカットします。

テープを歯間部に挿入し、舌側と唇側からテープの両端を引っ張り、しわを伸ばしながら隣在歯に貼り付けます。

透明度と操作性アップしました!



複製型用透明シリコン印象材 EZ-COPY クリアマトリックス

透明度が高く、適度な流動性がある複製型用透明シリコン印象材です。透明の印象材のため、光重合型コンポジットレジンの重合時に光を透過させることが可能です。

	口腔内	石膏模型上	シヨアラ硬さ	55±2°
操作時間	1分	2分	寸法変化	±0.6%
硬化時間	3分	4分		


クリアでマルチな印象用トレー



材質：ポリアミド樹脂
サイズ：横 66mm × 縦 36mm × 高さ 29mm

クリアマトリックス用トレー マルチクリアトレー


クリアな印象用トレーのため、EZ-COPYクリアマトリックスと合わせて使用することでダイレクトモックアップやプロビジョナルレストレーションの作製時に目視で確認しながらの作業が可能です。

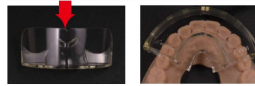

マルチクリアトレーの辺線にある切り込みを正中に合わせて簡単に装着することができます。

研磨ディスク

TDV プラクシス

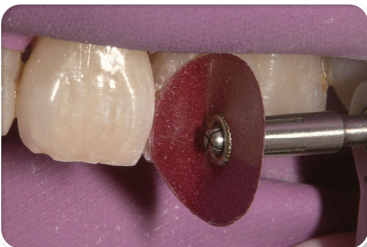

- コンポジットレジン研磨用ディスクとマンドレルです。
- ディスクの厚みが薄く、フレキシブルなため、コンポジットレジン充填後の隣接面や湾曲した隅角部なども研磨することができ、支台歯形成時の調整などにも適しています。
- 近心面または遠心面などに応じて、ディスクの研磨面(片面)を反転させて、マンドレルに簡単に装着することができ、隣在歯を傷つけずに形態修正および研磨をすることができます。
- 研磨効率が高く、チェアタイムを短縮させることができます。



TDV プラクシス アソートキット

- 内容
- ・ 研磨ディスク 3/8インチ 各5枚
コース
ミディアム
ファイン
エクストラファイン
 - 1/2インチ 各10枚
コース
ミディアム
ファイン
エクストラファイン
 - ・ マンドレル 1本

3/8インチ (9.5mm)				1/2インチ (12.7mm)				マンドレル
コース (粗) ブラウン	ミディアム (中粗) ローズ	ファイン (細) ピンク	エクストラファイン (極細) ホワイト	コース (粗) ブラウン	ミディアム (中粗) ローズ	ファイン (細) ピンク	エクストラファイン (極細) ホワイト	全長: 25mm

※粗さは濃い色(目が粗い)から薄い色(目が細かい)に色分けされています。
※研磨ディスクは単回使用です。マンドレルはオートクレーブ滅菌(126°C、16分)対応です。

*実際のサイズとは異なります。

優れた接着力を維持する
ポスト窩洞専用ライトガイド

ルーシーポスト Luci Post

求めるのは
強固な接着力を生み出す
ライトガイド

◆ご存じですか?
光重合の有効照射深度は、ライトガイド先端部から1mm離れることに5%位づつ重合率が低下し、更に10mmで重合能力を失います。

◆「ルーシーポスト」を使えば
今まで届けにくかったポスト窩洞最深部への照射が可能になります。

◆接着力を強化させます!
デュアルキュアボンディング処理時にルーシーポストを用いた照射により、更に強固な接着を得ることができます。

from NIKKOSHA to you
▶ポスト窩洞専用ライトガイド
(50本入)
(10本入)

コンタクトウェッジ

マトリックスに穏やかな圧力を加えて固定する弾性ポリウレタン製ウェッジです。マトリックスと隣接面との間にスペースを生じませんので、マトリックスと歯質の間からフロアブルレジン等が流れ出す心配がありません。

S グリーン

高さ: 2.0mm

M イエロー

高さ: 2.6mm

L ブルー

高さ: 3.2mm

- コンタクトウェッジ(L ブルー) 85個入
- コンタクトウェッジ(M イエロー) 85個入
- コンタクトウェッジ(S グリーン) 85個入
- コンタクトウェッジ(キット)
内容:コンタクトウェッジ(S グリーン 85個、M イエロー 85個、L ブルー 85個)
- コンタクトウェッジ(イントロキット)
内容:コンタクトウェッジ(S グリーン 30個、M イエロー 30個、L ブルー 30個)
- 一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010001

取扱い

株式会社 ADI.G 〒920-8611 石川県金沢市浅野本町 1-10-10
TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115 mtogimitsu@adig.jp

5-D Japan セミナー 推薦 ご注文リスト

商品名	規格	定価	会員価格	ご注文数
TDV アイソテープ	ライトブルー	¥2,100	¥1,600	
ルーシーポスト	10本入	¥500	¥300	
ルーシーポスト	50本入	¥2,500	¥1,500	
EZ-COPY クリアマトリックス		¥6,000	¥5,500	
マルチクリアトレイ 3個入	クリアマトリックス用トレイ	¥3,900	¥2,950	
コンタクトウェッジ	S グリーン85入	¥11,500	¥9,150	
コンタクトウェッジ	M イエロー85入	¥11,500	¥9,150	
コンタクトウェッジ	L ブルー85入	¥11,500	¥9,150	
コンタクトウェッジ キット	S.M.L 各85個入り	¥28,000	¥22,400	
コンタクトウェッジ イントロキット	S.M.L 各30個入り	¥7,700	¥6,200	
TDV プラックスアソートキット		¥6,300	¥4,800	
TDV プラックス 研磨ディスク 3/8インチ	コース 30枚入	¥2,100	¥1,600	
TDV プラックス 研磨ディスク 3/8インチ	ミディアム 30枚入	¥2,100	¥1,600	
TDV プラックス 研磨ディスク 3/8インチ	ファイン 30枚入	¥2,100	¥1,600	
TDV プラックス 研磨ディスク 3/8インチ	エクストラファイン 30枚入	¥2,100	¥1,600	
TDV プラックス 研磨ディスク 1/2インチ	コース 30枚入	¥2,100	¥1,600	
TDV プラックス 研磨ディスク 1/2インチ	ミディアム 30枚入	¥2,100	¥1,600	
TDV プラックス 研磨ディスク 1/2インチ	ファイン 30枚入	¥2,100	¥1,600	
TDV プラックス 研磨ディスク 1/2インチ	エクストラファイン 30枚入	¥2,100	¥1,600	
TDV プラックス マンドレル	1本入	¥1,800	¥1,400	

※上記価格に消費税は含まれておりません。※消費税率は10%です。

※15,000円(税別)以上のご注文にて、送料無料となります。

※お届けまでにお時間を要する場合がございます。

※価格は予告なく変更される場合がございます。

医院名	お名前
住 所 〒	
TEL	FAX
E-mail	
<p>※FAXまたはEmailにてご注文下さい。</p> <p><input type="checkbox"/> アメリカン・エクスプレス・カード決済</p> <p><input type="checkbox"/> ダイナース・クラブ・カード決済</p> <p>注 ※カード決済ご希望の方は、事前にカード登録が必要となります。あらためてご連絡申し上げます。</p> <p><input type="checkbox"/> 代引きによる決済 別途代引き手数料が必要です</p>	

【お問合せ先】

〒920-8611 石川県金沢市浅野本町 1-10-10

株式会社ADI.G内 5-D Japan 担当宛

TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115

E-mail : mtogimitsu@adig.jp

ご注文日

年 月 日